

ブロッキング試薬


製品名	メーカー・規格	毒劇物	関連広報物	製品番号	容量	価格	特別価格
ブロッキングワン <small>Pick up! 46</small>	SP	-	BULLETIN-L-95	03953-66	100 mL	3,400	2,040
				03953-95	500 mL	7,000	4,200
ブロッキングワン P <small>Pick up! 46</small> 内因性ホスファターゼ非含有タイプ	SP	-	BULLETIN-L-95	05999-84	200 mL	4,600	2,760

Pick up! 46


短時間で効果的にブロッキング可能な高性能ブロッキング試薬『ブロッキングワン&ブロッキングワン P』

- 短時間でブロッキング
- 効果的にブロッキング
- 冷蔵(4℃)で保存可能
- 多様なアプリケーションに使用可能

ブロッキング : ウェスタンブロットングでは原液、
ELISA では 5 倍希釈で使用
酵素標識抗体の希釈液 : 20 倍希釈で使用

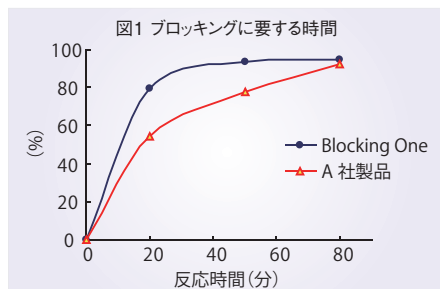

A社製品を使用した場合と比べ半分以下の時間でブロッキングが可能です。

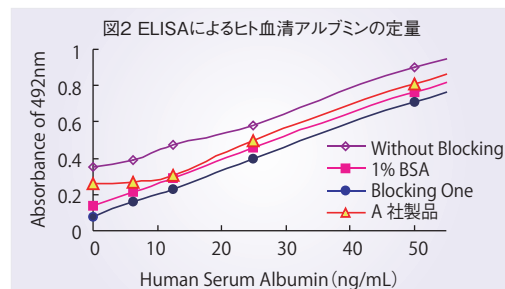

一般的なブロッキング法や他社製品と比較してブロッキング効果が高いので、低濃度領域での検量線の直線性が高く、また低バックグラウンドの結果が得られます。

発色検出試薬

製品名	メーカー・規格	毒劇物	関連広報物	製品番号	容量	価格	特別価格
ELISA POD基質A.B.T.Sキット	SP	-	-	14351-80	1 kit	11,000	6,600
ELISA POD基質TMBキット(Popular) <small>Pick up! 47</small>	SP	-	BULLETIN-L-114	05298-80	1 kit	7,800	4,680
ELISA POD基質TMB溶液(Easy) <small>Pick up! 48</small>	SP	-	BULLETIN-L-114	05299-54	100 mL	8,200	4,920


Pick up! 47

ELISA での TMB キット『ELISA POD 基質 TMB キット(Popular)』

弊社従来品(#14353-31)より感度がアップし、しかもお求め安くなりました。

- 安価
- 高感度、低バックグラウンド

■ 2液タイプ TMB 基質溶液 検量線比較 (Δ値)

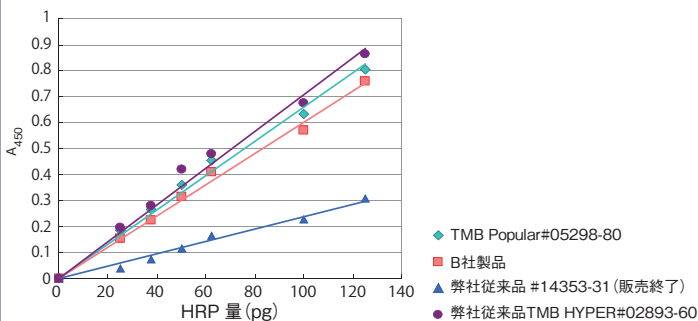


Pick up! 48

ELISA での TMB キット『ELISA POD 基質 TMB 溶液(Easy)』

基質液と発色液が混合済みの、Ready to use タイプです。

- Ready to use
- 低バックグラウンド

■ 1液タイプ TMB 基質溶液 検量線比較 (Δ値)

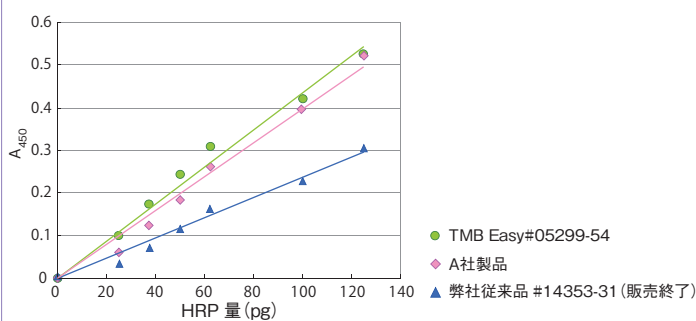

増感・検出の精度向上

製品名	メーカー・規格	毒劇物	関連広報物	製品番号	容量	価格	特別価格
シグナル増強剤 HIKARI (ウェスタンブロットング, ELISA用) (50mlセット)	SP	-	BULLETIN-L-108	02267-41	1 set	10,000	6,000
シグナル増強剤 HIKARI (ウェスタンブロットング, ELISA用) (250mlセット)	SP	-	BULLETIN-L-108	02270-81	1 set	30,000	18,000
シグナル増強剤 HIKARI (ウェスタンブロットング, ELISA用) A液	SP	-	BULLETIN-L-108	02272-74	250 mL	17,000	10,200
シグナル増強剤 HIKARI (ウェスタンブロットング, ELISA用) B液	SP	-	BULLETIN-L-108	02297-64	250 mL	17,000	10,200